



cromentis LAB

www.cromentislab.shop
www.cromentislab.com

cromentis gmbh | Postfach 221 | 4107 Ettingen

Individuelle Laboreinrichtungen aus Edelstahl

Wir planen, fertigen und montieren individuelle und hochwertige Laboreinrichtungen aus Edelstahl. Sie werden komplettiert durch zusätzliche Ausstattungen wie Spülen, Anschlüsse und diverse Möglichkeiten zur Schadstoffabsaugung.

„Eine individuelle Lösung ist mehr als eine Sorge weniger.“

Zuschneidetisch



Die VOGEL Universal-Zuschneidetische finden überall dort Verwendung, wo unter schadstoffbelasteter Luft histologische Präparate zugeschnitten, gefärbt und eingedeckt werden. Da es sich meist um formalin- oder xylolbelastete Luft handelt, erfolgt die Absaugung der gesamten Arbeitsfläche nach unten.

Die zulässigen AGW (Arbeitsplatz-Grenzwerte) werden hierbei deutlich im gesamten Absaugbereich, bei entsprechender Arbeitsweise, unterschritten.

Wir bieten vielseitige Varianten, die den Wünschen jedes Anwenders optimal angepasst werden können. Neben der sauberen Luft wird besonders auf die räumlichen Gegeben-

heiten im Labor sowie auf Ergonomie Wert gelegt. Die Installation des Zuschneidetisches kann an einer beliebigen Stelle im Labor erfolgen.

Wir liefern Ihnen Zuschneidetische nach ihren Wünschen im Umluft- und Abluftbetrieb.

Spültischanlagen



Spültischanlagen zur schadstofffreien Reinigung von Probegefäßen jeglicher Art.

Individuell anpassbar.




cromentis LAB

www.cromentislab.shop
www.cromentislab.com

cromentis gmbh | Postfach 221 | 4107 Ettingen

Sektionstische

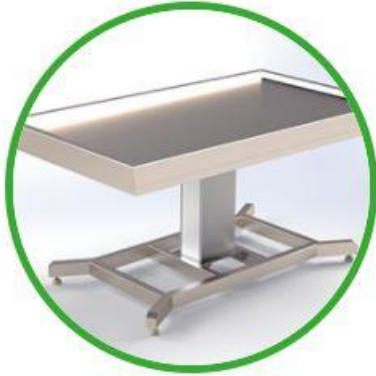

Sektionstische mit und ohne elektrischer Höhenverstellung, sowie stationär oder fahrbar.

Individuelle Anfragen jederzeit möglich.

Nasspräparateschränke



- Nasspräparateschrank mit Schadstoffabsaugung im Umluftbetrieb oder über hauseigene Abluft
- Stabile Konstruktion aus geschliffenem Edelstahl
- Individuelle Gestaltung möglich
- Größe und Ausstattung nach Wunsch

Umluftstation



Mit dem Zuschneidetisch UCSF 2015 richten Sie sich sehr schnell einen Arbeitsplatz mit Formalinabsaugung ein. Die Installation geschieht schmutzfrei und geräuschlos während Ihres Laborbetriebs. Wir empfehlen den Einsatz der UCSF 2015 als Arbeitsplatz für das Bearbeiten von kleinen Hautproben oder Biopsien.

Der Zuschneidetisch ist mit speziellen Formalinfiltern ausgestattet und funktioniert nach dem Umluftprinzip. Die Filterkassetten lassen sich einfach durch Ihr eigenes Laborpersonal austauschen. Es wird kein Spezialwerkzeug benötigt.



Abluftelemente



VOGEL Absaugeinheit

Die Absaugeinheit ist als Tischabzug am Eindeckplatz, am Handfärbeplatz oder am Biopsieeinkapselplatz aufzustellen. Die entsprechend der Nutzung ausgesuchten Filter schützen Sie vor Xylol-, Alkohol- und Formalindämpfen. Bei geringem Probendurchsatz ist die VAE 988 in der Lage die Arbeitsplatzgrenzwerte zu unterschreiten. Die VAE 988 bzw. VAE 991 sind eine schnelle und unkomplizierte Lösung, um einen Abzug in Ihrem Labor zu installieren. Sie benötigen lediglich eine stabile Stellfläche und eine 230 V-Steckdose.


Durch die rückwärtige Absaugung können Sie die Arbeitsfläche uneingeschränkt nutzen. Die Arbeitsfläche wird durch eine Leuchtstoffröhre ausgeleuchtet.

Das gesamte Gerät (Korpus und Arbeitsfläche) ist aus Edelstahl gefertigt und hat durch spezielle Dämmmatten einen niedrigen Geräuschpegel. Der Filterwechsel kann von Ihnen selbstständig durchgeführt werden.

Absaugeinheit

- Abluftelement aus Edelstahl mit Glasabschottung und rückwärtiger Absaugung
- Individuelle Lösungen möglich

Zubehör

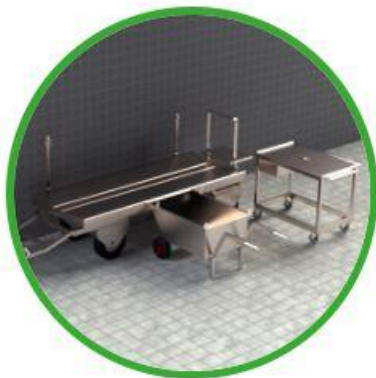

Zubehör im Bereich der Edelstahlprodukte.