

CAPP Origami

REAGENZIERESERVOIRS




CAPPOrigami steht für eine neue Art des Denkens, wenn es um Reagenzienreservoirs geht.

CAPPOrigami Reagenzienreservoirs haben einen scharfen V-förmigen Boden, der die Bildung von Blasen verhindert und dafür sorgt, dass Sie auch den letzten Tropfen Flüssigkeit entnehmen können. Dies erleichtert das Pipettieren und gewährleistet eine optimale effiziente Nutzung des Reagenzes.

Die steife Konstruktion von CAPPOrigami führt zu einem beständig festen Reservoir. Dieses einfach zu verwendende Design zeichnet sich durch vorgefaltete Linien aus. Um Ihre CAPPOrigami Reagenzienreservoirs zusammenzubauen, klappen Sie es einfach hoch, indem Sie die Seiten zusammenschieben, wodurch ein starkes, stabiles Reservoir entsteht.

Diese aus langlebigem Polypropylen hergestellten Behälter werden als flache Platten verpackt, versandt und gelagert, was sowohl Platz als auch Versandkosten spart.

Sie haben die Wahl zwischen 30mL Reservoirs für 8/16-Kanal- oder 40mL für 12-Kanalpipetten. Verwenden Sie Ihr Reagenz am effizientesten mit CAPPOrigami Reagenzienreservoirs. Da dieses Produkt umwelt- und lagerfreundlich ist, wird es den Platz auf Ihrer Arbeitsfläche vergrößern und Ihnen Geld sparen.

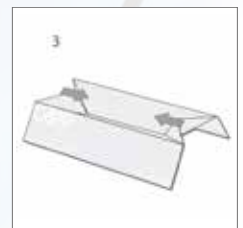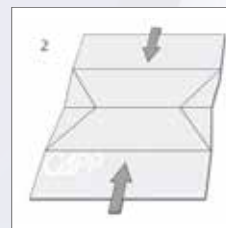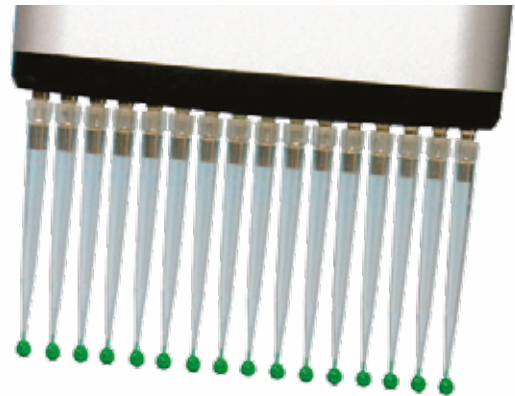

Bestellinformationen

Kat.-Nr.	Beschreibung
CA40505	CAPPOrigami 30mL (8- und 16-Kanalpipetten), Beutel mit 50 Stk.
CA40506	CAPPOrigami 30mL (8- und 16-Kanalpipetten), vorsterilisiert, 10 Beutel mit 5 Stk.
CA40510	CAPPOrigami 40mL (12-Kanalpipetten), Beutel mit 50 Stk.
CA40511	CAPPOrigami 40mL (12-Kanalpipetten), vorsterilisiert, 10 Beutel mit 5 Stk.

